

## **Ninaneelukaape kogumine viiruste analüüsiks reaalaaja-PCR meetodil.**

Proovivõtukomplektid respiratoorse infektsiooni sümptomitega patsientidelt ninaneelukaape võtmiseks, säilitamiseks ja transportimiseks väljastatakse laborist. Proovi kogumiskomplekti kuulub steriilne flokeeritud nailonotsaga kergestimurtava varrega tampoon ning tarvik proovi transportimiseks.

### **Proovide võtmine, säilitamine ja transport**

#### **Proovivõtukomplektid ninaneelukaape kogumiseks:**

- \* Xpert Nasal Sample Collection Kit for Viruses (SWAB/F-100 või analoog, 0,85% soolalahus),
- \* UTM transportsöödet (või analoog) koos steriilse flokeeritud nailontampooniga.

**Märkus:** proovivõtukomplektide koostis võib muutuda.

Proovivõtukomplekti säilitatakse vastavalt pakendile märgitud tingimustele.


#### **Ninaneelukaape kogumine (joonis 1)**

Viige steriilne tampoon ninasõõrme nasofarünksi tagaosani ning keerutage tampooni mitu korda. Korrake toimingut teise ninasõõrmega. Hoitke tampooni nii, et see ei puutuks vastu muid pindu peale sinsõõrme.

Eemaldage tampoon ninast ning murdke tampooni vars markeeritud joonelt katki, painutades seda vastu katsuti seina.

Sulgege markeeritud katsuti lekkekindlalt korgiga.

Transportige kogutud proov kohe laborisse.

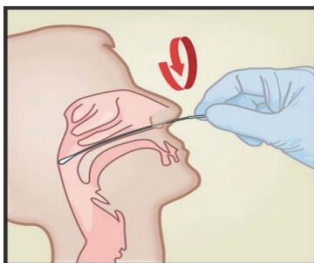

**Joonis 1** Ninaneelukaape kogumine

Kogutud proove võib enne testimist säilitada toatemperatuuril (+15...+30 °C) kuni 24 tundi või külmikus +2...+8 °C juures kuni 7 päeva.